

MTL-B010 スタートアップガイド

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「スタートアップガイド」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

必ずお読みください

本紙はご使用前の簡易説明書になります。

詳しい取扱説明書は弊社のWEBサイトより、閲覧、ダウンロード
をしていただけますので、そちらをご覧ください。



mottole 取扱説明書 ダウンロードページ

▶ mottole.jp/f/manual

下記の人は医師とご相談のうえ、使用してください。

- ・妊娠中、出産直前、糖尿病、神経障害や網膜障害などの合併症を含む方。
- ・ペースメーカーの使用、近日中に手術をした方、てんかんや偏頭痛、腰椎椎間板ヘルニア、むち打ちの方。
- ・近日中に人工関節置換術をした方、子宮内避妊具装着、金属インプラントなど身体に不安のある方。
- ・悪性腫瘍のある方
- ・心臓に障害のある方
- ・重度の血行障害がある方
- ・体温38℃以上の方（有熱期）

安全上のご注意



警告

リチウムイオン電池内蔵

- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。
- 廃棄の際は分解せず専用の回収ボックスに捨てる、または各自治体の指示に従って廃棄してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

警告

- ・修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。
- ・本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
- ・本体を火中に投げないでください。
- ・頭、心臓の近く、性器、骨や関節に使用しないでください。
- ・USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力が1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。

注意

- ・使用時間が極端に短くなったときは使用しないでください。
- ・液もれした場合など、専用の回収ボックスに捨てられないときは、各自治体の指示に従って廃棄してください。
- ・炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。
- ・本製品は60℃未満の場所で保管してください。
- ・ご使用時は45℃未満の環境でご使用ください。
- ・幼児の手の届くところに保管しないでください。
- ・お子様には使用させないでください。
- ・付属のUSBコードが傷んだり差し込みが緩いときは使用しないでください。
- ・一か所に過度に集中して使用しないでください。

セット内容

本体（リチウムイオン電池内蔵）、シリコンアタッチメントx4、アタッチメントx2、
USBコード、収納ケース、スタートアップガイド

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願いいたします。
補修用性能部品の生産終了後の保有期間は3年です。
その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。

お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けております。
16時以降のご連絡に関しては、翌営業日中に返信をさせていただきます。
下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。

▶ mottole.jp/f/contact



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。


■品番 ■色 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottole カスタマーサポートセンター>

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

各部名称

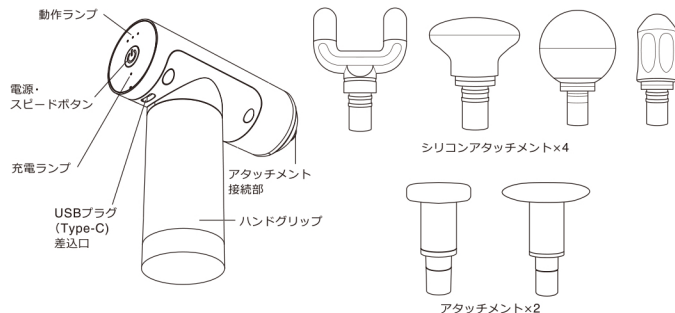

ご使用方法


本体の充電

付属のUSBコードをパソコンやACアダプタの充電器に繋いで充電してください。
充電中はLEDが赤色に点灯し、完了するとLEDが消灯します。

ご使用方法

アタッチメント接続部にお好みのアタッチメントを取り付けます。
アタッチメントを接続部に根元までしっかりまっすぐ押し込んでください。
電源ボタンを長押しすると低速モードで作動します。

電源・スピードボタンを押して振動速度を調整します。
電源スイッチを長押しすると低速モードで作動します。
もう一度押すと中速モード、もう一度押すと高速モードになります。
もう一度押すとスタンバイになり、もう一度押すと低速モードにもどります。

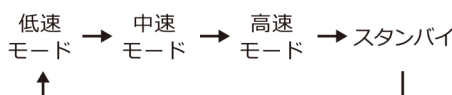

起動後10分で自動停止します。
電源ボタン長押しで停止します。