



取扱説明書

MTL-S001

電池式電動歯ブラシ


この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、
誠にありがとうございます。
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。
お読みになった後は、大切に保管してください。

もくじ

はじめに	もくじ	1 ページ
	各部名称	2 ページ
	安全上のご注意	3 ページ
	使用上のご注意	4 ページ
	ご使用前の準備	5 ページ
使い方	ご使用方法	6~7 ページ
	使用後のお手入れ	7 ページ
困ったときは	故障かな?	8 ページ
	アフター販売	8 ページ
	アフターサービス	9 ページ
	カスタマーサポートセンター	9 ページ
	仕様	10 ページ

各部名称

＜各部名称＞

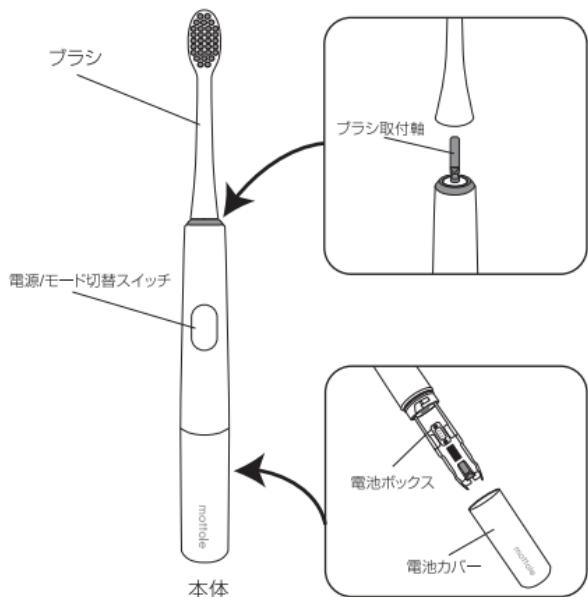

安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

△警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

△注意 誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  この表示は「禁止」を示します。  この表示は「強制」を示します。

△警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行なわないでください。  <small>改修禁止</small>	火中投入、加熱、高温での放置をしないでください。  <small>禁止</small>
乳幼児の手の届くところに置かないでください。  <small>禁止</small>	浴室での使用は絶対にしないでください。  <small>禁止</small>

△注意

お口のお手入れ以外に使用しないでください。  <small>禁止</small>	ブラシのプラスチック部分を歯にあてないでください。  <small>禁止</small>
ブラシは他の人と共用しないでください。  <small>禁止</small>	治療中の歯や口腔内に気になる症状がある場合は、その部分に使用しないでください。  <small>禁止</small>
歯や歯茎にブラシを強く当てたり、長く当てすぎないでください。	
 <small>禁止</small> 歯や歯茎を痛めることがあります。	


使用上のご注意

- 毛先がひろがったり、つぶれたブラシを使用しないでください。
破損したブラシがブラッシング中に外れてしまうことがあります。
- 傷んできたブラシは早めに新しい物と交換してください。
- お子様がご使用の際は、保護者の監督のもとに行ってください。
- 食器洗浄器や食器乾燥機、電子レンジ等で洗浄・乾燥しないでください。
- 本取扱説明書に記載してある以外の目的で使用しないでください。

ご使用前の準備

電池を入れる

- ① 電池カバーを図の矢印の方向に回して外します。
- ② 単4乾電池1本(別売)を電池ボックス内の電池の刻印に合わせて、極性を正しく電池を入れ、電池カバーを戻してください。

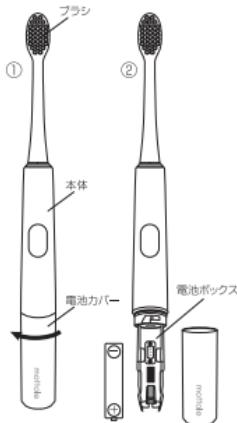

ブラシを取り付ける

図のようにブラシの正面と本体の正面を合わせて、カチッときがするまでしっかりとブラシを押し込んでください。



△ 注意

毎回ご使用の前にブラシがしっかりと固定されているか、確認してからご使用してください。
固定されていないと予期せぬ動きをして、口腔内を傷つけるおそれがあります。

ご使用方法

ブラシを水で濡らし、お好みにより歯磨き剤を少量付けてブラッシングします。
※電源のオンオフは水や歯磨き剤の飛び散りを防ぐため、ブラシを口腔に入れた状態で行なってください。

※研磨剤入りの歯磨き剤は、歯や歯ぐきを傷めるおそれがありますのでお勤めできません。


上手な磨き方



歯の側面、歯と歯茎の境目



歯の裏側、凸凹の激しい部分

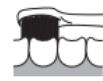

歯の平面部分
ブラシ歯に対して90°に当てる

△ 注意

- ・使い始めてから歯ぐきから出血する場合があります。通常は2~3日後に出血は止まりますが、1週間以上出血が止まらないようなときは歯科医にご相談ください。
- ・歯磨き以外の目的に使用しないでください。

— ブラッシングモードの切り替え —

本製品は2種類のブラッシングモードをお選びいただけます。

ブラッシングモードの切り替えは電源/モード切替スイッチで行います。
電源/モード切替スイッチを押すごとに1つずつモードが切り替えられます。
※ブラッシングモードの切り替えは3秒以内に電源/モード切替スイッチを押してください。

3秒以上たってから電源/モード切替スイッチを押すと電源が切れます。

Soft モード（弱）

敏感な人向けのモードで1分間に18,000回の振動を繰り返します。

Normal モード（強）

通常のモードで1分間に24,000回の振動を繰り返します。



ご使用方法

最適な歯磨きをサポートする3つの機能

オートオフ機能

米国の歯科専門家推奨のブラッシング時間である2分間で自動的にストップします。磨き過ぎや、磨き不足を防ぎます。

インターバル機能

30秒ごとに一瞬動きが止まり、時間の目安をお知らせします。
2分間に30秒×4に区切ることにより、右上・左上・右下・左下とまんべんなく磨くことが出来ます。

モード記憶機能

最後に使用したブラッシングモードを記憶し、次回使用時に同じモードからはじめられます。

※モードを切り替えたい時は、電源を入れたあと3秒以内に再度電源/モード切り替えスイッチを押してください。

使用後のお手入れ

ブラシ 本体から外し、水またはぬるま湯でよくすすぎ洗いして乾かしてください。

※最適なブラッシング効果を得るために、ブラシは約3ヶ月ごとに交換することをお勧めします。(使用頻度により異なります)

本体 ブラシを外し、水またはぬるま湯でよくすすぎ洗いして乾かしてください。

※本製品は防水基準IPX7に対応していますので水洗いしても問題ありません。

△ 注意

- お手入れの際は必ず電源をオフにして、電源コードは抜いた状態で行ってください。
- シンナー・ベンジン・アルコール類は使用しないでください。
変色・変形・故障の原因となります。

故障かな?

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは	考えられる理由	対処方法
動かない	電池が切れている。	電池を交換してください。
ブラッシング中に一瞬止まる	インターバル機能が作動しています。(7ページ参照)	正常な動作です。
2分で電源が落ちる	オートオフ機能が作動しています。(7ページ参照)	正常な動作です。

アフター販売

ブラシの交換は約3ヶ月使用が目安です。

交換の際は本品専用の替えブラシをお買い求めください。



お買い求めは下記の弊社販売サイトにて販売しております。

mottole

モットル



楽天店



mottole

モットル

Yahoo!店



弊社カスタマーサポートセンターでもお買い求めいただけます

お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただいております。
送料:900円(税別・手数料込)※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。

詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。

本書の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となります。別途消費税がかかります。ご了承ください。

アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品をお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせて頂きます。
お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。
その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただかくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。



カスタマーサポートセンター

TEL

► 0570-080856 受付時間 10:00~16:00
(土日祝、弊社休業日を除く)

- ※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。
予めご了承ください。
- ※お電話番号をお確かめのうえ、おかげ間違いのないようにおかけください。
- ※電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。

MAIL

info-m@mottole.jp

返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■品名 ■お買い上げ日 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容

仕様

品番	MTL-S001
寸法(約)	16×16×137mm
重量(約)	26g
振動方式	音波式
振動数	24,000回／分
モード	2段階(弱・強)
オフタイマー	2分
電源	単4電池1本(別売) 約200回使用可能
材質	本体:ABS・ステンレス、替えブラシ:PP
セット内容	本体(ブラシ装着済)、替えブラシ、説明書

- ※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。
- ※製品と印刷物では若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。

発売元 株式会社 阪和

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F