



# 取扱説明書

MTL-S002

## 充電台付電動歯ブラシ

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、  
誠にありがとうございます。  
お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。  
お読みになった後は、大切に保管してください。



**警告**


リチウムイオン電池の耐熱温度は 60℃です。  
炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置  
しないでください。

## もくじ


はじめに	もくじ	1ページ
	各部名称と付属品	2ページ
	安全上のご注意	3～4ページ
	ご使用前の準備	5ページ
	初めてのご使用前に	5ページ
使い方	ご使用方法	6～7ページ
	使用後のお手入れ	7ページ
	電池について	8ページ
困ったときは	故障かな?	9ページ
	アフター販売	10ページ
	アフターサービス	11ページ
	カスタマーサポートセンター	11ページ
仕様		12ページ

## 各部名称と付属品

### <各部名称>

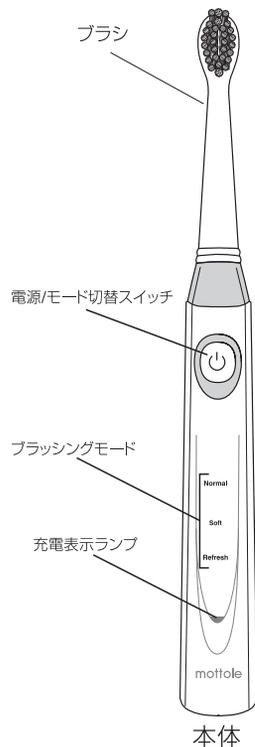

### <付属品>

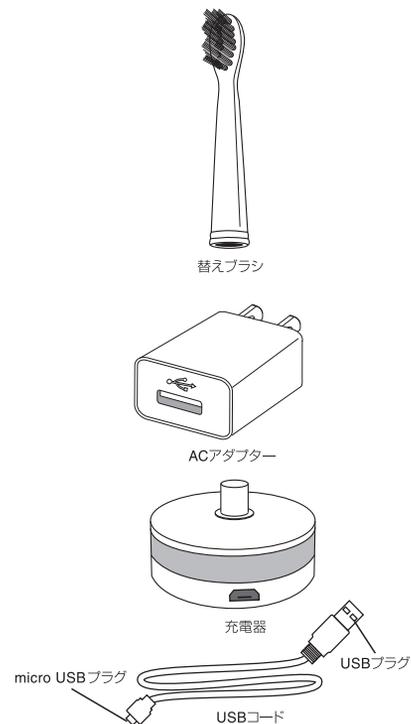

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

本製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に本項目[安全上のご注意]を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

**警告** 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

**注意** 誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例  この表示は「禁止」を示します。  この表示は「強制」を示します。

### 警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造・修理を行わないでください。



発火したり、異常動作してケガをすることがあります。

改造禁止

ACアダプターのプラグは、根本まで確実に差し込んでください。



火災や感電の原因となります。

禁止

乳幼児の手の届くところに置かないでください。



ケガや事故の原因となります。

禁止

電源は交流100Vのコンセントをご使用ください。



火災・感電の原因となります。

禁止

充電する時は専用の充電器以外使用しないでください。



故障の原因となります。

禁止

濡れた手でACアダプターのプラグ、USBコードを抜き差ししないでください。



感電やケガをすることがあります。

禁止

火中投入、加熱、高温での充電/放置をしないでください。



発熱、発火、破裂の原因となります。

禁止

充電器に水をかけたり、水につけたりしないでください。



故障や感電のおそれがあります。

禁止

USBコードを無理に曲げたり、傷つけたり、ねじったり、たばねたり、引っ張ったり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしないでください。



火災やショート、感電の原因となります。

禁止

## 注意

お口のお手入れ以外に使用しないでください。



ケガや事故の原因となります。

禁止

ブラシのプラスチック部分を歯にあてないでください。



歯や歯茎を傷つける原因となります。

禁止

ブラシは他の人と共用しないでください。



感染や炎症の原因となります。

禁止

治療中の歯や口腔内に気になる症状がある場合は、その部分に使用しないでください。



ケガの原因となります。

禁止

歯や歯茎にブラシを強く当てたり、長く当てすぎないでください。



歯や歯茎を痛めることがあります。

禁止

充電時以外はコンセントからACアダプターを抜いてください。



ケガややけど、絶縁劣化による感電、火災の原因となります。

プラグを抜く

## 使用上の注意

- ・毛先がひろがったり、つぶれたブラシを使用しないでください。破損したブラシがブラッシング中に外れてしまうことがあります。傷んできたブラシは早めに新しい物と交換してください。
- ・お子様がご使用の際は、保護者の監督のもとに行なってください。
- ・食器洗浄器や食器乾燥機、電子レンジ等で洗浄・乾燥しないでください。
- ・本取扱説明書に記載してある以外の目的で使用しないでください。

## ご使用前の準備


### 充電する

- ① USBコードのmicro USBプラグを充電器に挿し込みます。
- ② USBコードのUSBプラグをACアダプターに挿し込みます。
- ③ ACアダプターをコンセントに挿し込みます。
- ④ 充電器に本体を置くと、充電表示ランプが赤色に点灯し、充電が始まります。充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。

※フル充電に要する時間は約10時間です。  
※フル充電後、約60回使用出来ます。  
※充電中は本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。

#### ⚠ 注意

- ・濡れた手で電源プラグを抜き挿ししないでください。感電のおそれがあります。
- ・必ず100V交流電源をお使いください。

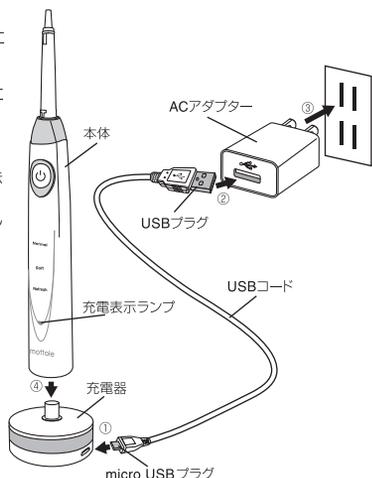


### ブラシを取り付ける

- ① ブラシ背面の□の部分と、本体背面の◡の右端部分が合うようにブラシを本体に差しこみます。(図①参照)
- ② ブラシを図の矢印の方向に動かなくなるまで回し、ブラシを固定します。そのときブラシ背面の□の部分と、本体背面の○の部分の縦の位置でそろっていることを確認してください。(図②参照) 外すときは逆に回して外してください。

#### ⚠ 注意

- ・毎回ご使用前にブラシがしっかりと固定されているか、確認してからご使用してください。固定されていないと予期せぬ動きをして、口腔内を傷つけるおそれがあります。

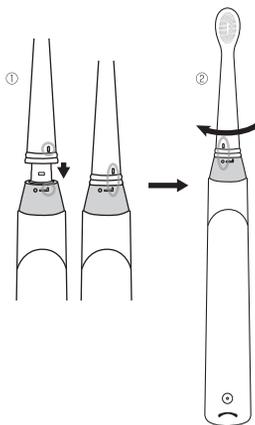

## ご使用方法


### 歯磨き

ブラシを水で濡らし、お好みにより歯磨き剤を少量付けてブラッシングします。

※電源のオン/オフは水や歯磨き剤の飛び散りを防ぐため、ブラシを口腔に入れた状態で行ってください。

※研磨剤入りの歯磨き剤は、歯や歯ぐきを傷めるおそれがありますのでお勧めできません。

### 上手な磨き方

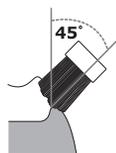


歯の側面、歯と歯茎の境目

ブラシの毛先が歯に対して45°になるように当てる



歯の裏側、凹凸の激しい部分

刃の角度に合わせて、ブラシを縦に当てる

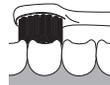

歯の平面部分

ブラシ歯に対して90°に当てる

#### ⚠ 注意

- ・使い始めてから2～3日は出血することがございます。1週間以上使用しても使用時に出血する場合は使用を止め、歯科医にご相談ください。
- ・歯磨き以外の目的に使用しないでください。

### ブラッシングモードの切り替え

本製品は3種類のブラッシングモードをお選びいただけます。

ブラッシングモードの切り替えは電源/モード切替スイッチで行ないます。電源/モード切替スイッチを押すごとに1つずつモードが切り替わります。※ブラッシングモードの切り替えは3秒以内に電源/モード切替スイッチを押してください。3秒以上たってから電源/モード切替スイッチを押すと電源が切れます。

#### Normal モード


通常のモードで1分間に40,000回の振動を繰り返します。

#### Soft モード

敏感な人向けのモードで1分間に33,000回の振動を繰り返します。

#### Refresh モード

2段階のスピードが交互に繰り返します。

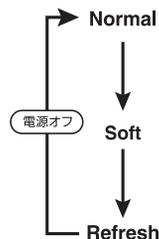

## ご使用方法

### 最適な歯磨きをサポートする3つの機能

#### オートオフ機能

米国の歯科専門家推奨のブラッシング時間である2分間で自動的にストップします。  
磨き過ぎや、磨き不足を防ぎます。

#### インターバル機能

30秒ごとに一瞬動きが止まり、時間の目安をお知らせします。  
2分間を30秒×4に区切ることで、右上・左上・右下・左下とまんべんなく磨くことができます。

#### モード記憶機能

最後に使用したブラッシングモードを記憶し、次回使用時に同じモードからはじめられます。  
※モードを切り替えたい時は、電源を入れたあと3秒以内に再度電源/モード切り替えスイッチを押してください。

#### 舌磨き

ブラシの背面を舌に軽く当て、ゆっくりと動かし舌の汚れを取ります。

約20～30秒程で舌全体をまんべんなく磨いてください。

※長時間磨いたり、強くこすったりしないでください。



## 使用後のお手入れ

**ブラシ** 本体から外し、水またはぬるま湯でよくすすぎ洗いして乾かしてください。  
※最適なブラッシング効果を得るため、ブラシは約3ヶ月ごとに交換することをお勧めします。(使用頻度により異なります)

**本体** ブラシを外し、水またはぬるま湯でよくすすぎ洗いして乾かしてください。  
※本製品は防水基準IPX7に対応していますので水洗いしても問題ありません。

**充電器** 固く絞った湿らした布で拭いてください。  
※micro USBのジャック部分は絶対に濡らさないでください。  
故障の原因となります。

### △ 注意

- ・お手入れの際は必ず電源をオフにして、電源コードは抜いた状態で行ってください。
- ・充電器は絶対に水の中に入れてください。
- ・シンナー・ベンジン・アルコール類は使用しないでください。変色・変形・故障の原因となります。

## 電池について

※リチウムイオン電池は消耗品ですので、保証対象外となります。

内蔵のリチウムイオン電池は約300回充放電できます。  
ただし、使用環境や使用時間などで大きく変化します。

### △ 注意

- ・お客様自身で充電電池の交換はしないでください。
- ・交換して不要になった充電電池は、リサイクル処理が必要です。  
(各都道府県・市町村の指定場所、もしくは量販店のリサイクルコーナーに捨ててください)

## リチウムイオン電池のリサイクルについて



Li-ion

- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。  
ご使用済みの製品の廃棄に際しては分解せず、専用の回収ボックスに捨ててください。
- 絶対に分解して電池を取り出さないでください。

## 故障かな？

修理・サービスを依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは	考えられる理由	対処方法
動かない	充電が切れている。	充電してください。
充電してもすぐに充電切れになる	充電電池の寿命。	充電電池には寿命があります。電池交換については弊社サポートセンターまでご相談ください。(11ページ参照)
充電できない	充電器が正しくセットされていない。	ACアダプターをしっかりとコンセントに挿し込んでください。 USBコードをしっかりとACアダプター、充電器に挿し込んでください。 充電表示ランプが点灯しているか確認してください。
ブラッシング中に一瞬止まる	インターバル機能が作動しています。(7ページ参照)	正常な動作です。
2分で電源が落ちる	オートオフ機能が作動しています。(7ページ参照)	正常な動作です。

## アフター販売

ブラシの交換は約3ヶ月使用が目安です。  
交換の際は本品専用の替えブラシをお買い求めください。



**MTL-S002P1**  
MTL-S002 用替えブラシ  
**800円** (税抜)  
JAN CODE 4944370034486

お買い求めは下記の弊社販売サイトにて販売しております。

mottol  
モットル  
楽天店



mottol  
モットル  
Yahoo!店



### 弊社カスタマーサポートセンターでもお買い求めいただけます

お電話・Eメールでのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。  
送料:900円(税別・手数料込)※北海道・沖縄及び離島、一部の地域の方は別途費用が発生する場合がございます。  
詳しくは弊社サポートセンターまでご相談ください。  
本書の商品価格、送料、手数料はすべて税別表記となります。別途消費税がかかります。ご了承ください。

## アフターサービス

商品の品質には万全を期しておりますが、万一お届け時に商品が破損・汚損していた場合やご注文と異なる商品がお手元に届きました場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取替えさせていただきます。

お手数ですが商品到着後「1週間以内」にご連絡をいただけるようお願い致します。

その他ご不明点がございましたら弊社カスタマーサポートセンターへお問い合わせいただくか、mottole販売サイトのご利用ガイドをご覧ください。



## カスタマーサポートセンター

### TEL

▶ 0570-080856

受付時間 10:00~16:00  
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※お電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようにおかけください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

### MAIL

info-m@mottole.jp

ご返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■ 品番 ■ 品名 ■ お買い上げ日 ■ お買い上げ店名 ■ お問い合わせ内容

### 発売元 株式会社 阪和

〒550-0015 大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル2F

## 仕様

品番	MTL-S002
寸法(約)	25×26.5×222mm
重量(約)	79g
振動方式	音波式
振動数	40,000回/分
モード	3段階(ノーマル・ソフト・リフレッシュ)
オフタイマー	2分
電源	AC100V-240V 50/60Hz 無接点充電方式
充電電池	リチウムイオン電池 3.7V、260mAh
充電時間(約)	10時間 約60回使用可能
消費電力(約)	1W
電源コード(約)	USBコード:950mm
材質	本体:ABS・TPE・PC、替えブラシ:ABS・TPE
セット内容	本体(リチウムイオン電池内蔵、ブラシ装着済)、替えブラシ、充電台(無接点充電方式)、USBコード、ACアダプター

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。

※製品と印刷物では若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。

MEMO

MEMO