


mottole

取扱説明書

MTL-S004 音波式電動歯ブラシ

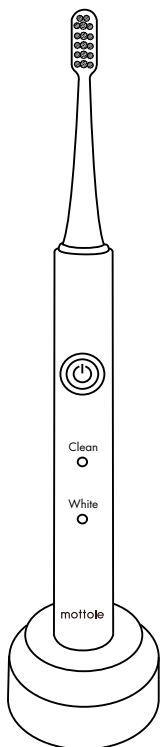

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

目次

▶ はじめに

目次 1～2ページ

各部名称 3ページ

安全上のご注意 4～14ページ

▶ 使い方・お手入れ

ご使用方法 15～18ページ

日常の点検・お手入れ 19ページ

保管のしかた 20ページ

廃棄のしかた 21ページ

目次

▶ 困ったときは

故障かな? [22ページ](#)

アフター販売 [23~24ページ](#)

アフターサービス [25~26ページ](#)


カスタマーサポートセンター [27ページ](#)

仕様 [28ページ](#)


各部名称

[目次へ↑](#)

▶ 本体

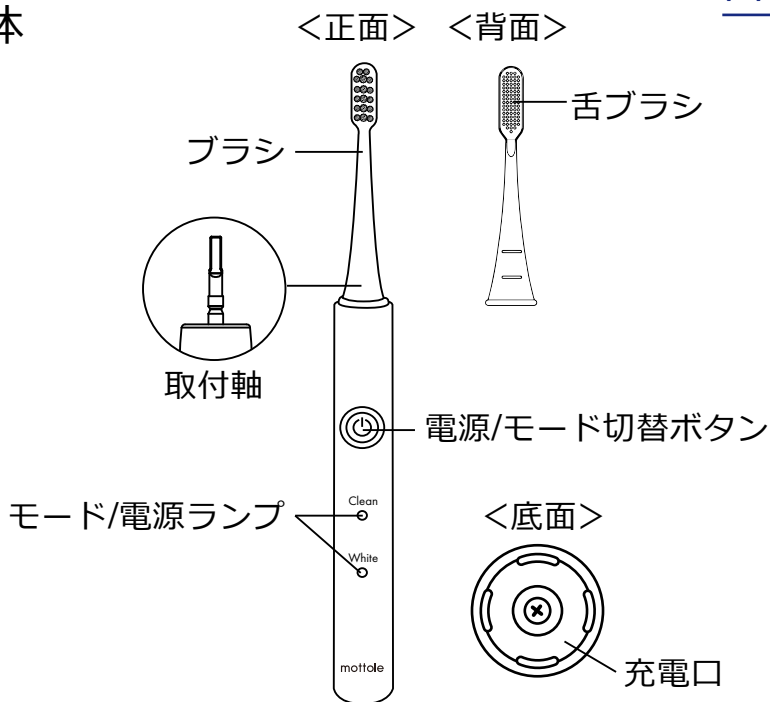

▶ 付属品

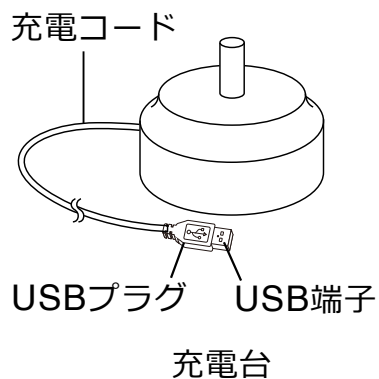

安全上のご注意

[目次へ↑](#)

必ずお守りください

本製品は家庭用です。



警告

Li-ion リチウムイオン電池内蔵

- 廃棄の際は内蔵されているリチウムイオン電池は取り外し、充電式電池リサイクル協力店にご持参、または設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。
- 炎天下や夏場の車内など、高温になる場所に放置しないでください。

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本書を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

安全上のご注意

警告

修理技術者以外の方は、絶対に改造・修理を行わないでください。



発火したり、異常動作したりして怪我をするおそれがあります。

改造禁止

幼児の手の届くところでのご使用はおやめください。



やけど・部品を誤飲するおそれがあります。

禁止

充電コードを傷つけないでください。



加工したり、引っ張ったり、上に物をのせたりすると破損して、火災・感電の原因となります。

強制

安全上のご注意

警告

お手入れは必ずUSBプラグを抜いてから行ってください。



感電や怪我をするおそれがあります。

強制

定期的にUSBプラグのホコリを掃除してください。



ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

強制

USBプラグは、ホコリや汚れが付着していないか確認し、根元まで確実に差し込んでください。



ホコリや汚れの付着、またはガタつきで接続が不完全な場合は異常に発熱し、充電コードが溶けたり変形したりして感電や火災の原因となります。

強制

安全上のご注意

警告

USBプラグを抜くときは、充電コードを持たずに必ずUSBプラグを持って抜いてください。



感電やショートの原因となります。

強制

高温になる場所での充電はしないでください。



ストーブのそば、炎天下の自動車の車内など高温になる場所で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂、発火の原因となります。

禁止

液漏れしたら火気から遠ざけてください。



リチウムイオン電池が液漏れしたり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏れた電解液に引火し、破裂・発火する原因となります。

強制

安全上のご注意

警告

充電する際は付属の充電台をご使用ください。



強制

付属以外の充電台を使用されると、火災・感電の原因となります。

濡れた手でUSBプラグを抜き差ししないでください。



禁止

感電して怪我をするおそれがあります。

USB接続式ACアダプターを使用して充電する場合は定格出力5V1A以上のACアダプターをご使用ください。



強制

製品の定格入力5V1A以下のUSB接続式ACアダプターを使用されると、USB接続式ACアダプターの故障の原因となります。

安全上のご注意

警告

長期間使用しないときは、必ずUSBプラグを抜いてください。



絶縁劣化による感電・漏電の原因となります。

強制

付属の充電コードが傷んでいる、または差し込みが緩いときは使用しないでください。



感電やショートの原因となります。

禁止

ご使用時は45℃以下の環境でご使用ください。



発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。

強制

安全上のご注意

警告

異常に気づいたら使用を中止してください。



強制

異臭・発熱・変色・変形・その他今までと異なることに気づいた時は、ただちに使用を中止してください。そのまま使い続けると電池が発熱・破裂・発火する原因となります。

本体を火中に投げないでください。



禁止

破裂して怪我をするおそれがあります。

本体に強い衝撃を加えないでください。



禁止

故障の原因となります。

安全上のご注意

⚠ 注意

直射日光が当たる場所に置かないでください。



リチウムイオン電池の性能劣化、液漏れ、発熱、発火などの原因となります。

禁止

炎天下や夏場の車内など高温になる場所に放置しないでください。



液漏れ、発熱、発火などの原因となります。

禁止

本製品は55℃未満の場所で保管してください。



リチウムイオン電池の性能劣化の原因となります。

強制

安全上のご注意

⚠ 注意

研磨剤が多く含まれている歯磨き剤（やに取り用・美白用等）は使用しないでください。



怪我、歯や歯茎を傷める原因となります。

禁止

ブラシを長時間、歯や歯茎の同じ場所に当てたり、強く当てたりしないでください。



怪我、歯や歯茎を傷める原因となります。

禁止

本体・ブラシのプラスチック部分を歯に当てないでください。



怪我、歯や歯茎を傷める原因となります。

禁止

安全上のご注意

⚠ 注意

ご自分で操作ができない方は使用しないでください。



怪我、歯や歯茎を傷める原因となります。

禁止

口腔内の感覚が弱い方は使用しないでください。



怪我、歯や歯茎を傷める原因となります。

禁止

歯を治療中の方、口腔内に気になる症状のある方、歯周病の疑いのある方は医師に相談のうえ使用してください。



怪我、歯や歯茎を傷める原因となります。

強制

安全上のご注意

⚠ 注意

本来の使用目的以外で 사용하지 않습니다.



事故や怪我の原因となります。

禁止

ブラシ部分を他人と共有しないでください。



感染症、炎症等の原因となります。

禁止

充電スタンドに金属製品を置かないでください。



火傷の原因となります。

禁止

お手入れの際シンナー・ベンジン・アルコール類
を使用しないでください。



変色・変形・故障の原因となります。

禁止

ご使用方法

[目次へ↑](#)

▶ 充電方法

- 充電コードのUSBプラグを、お持ちの5V1A以上出力できるアダプターに差し込みます。
- 本体の充電口を充電台に差し込みます。本体が振動し充電が開始します。
- 充電中、充電ランプが白に点滅します。充電ランプが点灯し、本体が振動したら充電完了です。
- 充電時間は約3時間です。
- 長期間使用しなかった場合、または購入したばかりの場合は、まず充電をしてください。
- 充電が完了したら、USBプラグを抜いてください。
- 充電中は動作しません。
- 本体を充電台から取り外すと振動します。

ご使用方法

▶使い方


- 1.本体の取付軸にブラシをしっかりと取り付けてください。
- 2.電源/モード切替ボタン $\text{\textcircled{C}}$ を押すとCleanモードで起動し、モード/電源ランプが白く点灯します。
- 3.もう一度電源/モード切替ボタン $\text{\textcircled{C}}$ を押すと、Whiteモードに切り替わります。
- 4.起動後2回電源/モード切替ボタン $\text{\textcircled{C}}$ を押す、または長押しすると、電源がオフになります。

▶磨き方の順序例

口腔内を上下、左右で4分割にし、1か所を以下の順に30秒かけて磨きます。

①歯の表側 ②噛み合わせ面 ③歯の裏側
約2分間で口腔内をむらなく均等に磨くことができます。

また30秒お知らせタイマー機能で起動から30秒後、約1秒停止します。

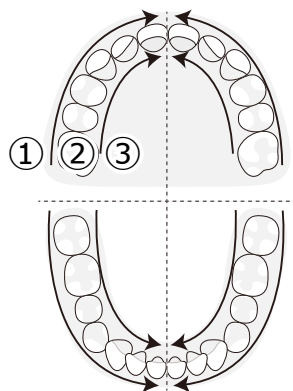


▶メモリー機能

長押しで電源をオフにすると、前回終了時と同じモードで起動します。

ご使用方法

▶磨き方


ブラシを水で濡らし、お好みにより歯磨き剤を少量付けてブラッシングします。

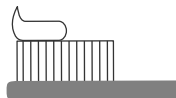


※電源のオン/オフは水や歯磨き剤の飛び散りを防ぐため、ブラシを口腔に入れた状態で行ってください。

※研磨剤入りの歯磨き剤は、歯や歯茎を傷めるおそれがありますので避けてください。


歯の側面、歯と歯茎の境目に
ブラシの毛先が歯に対して
45°になるように当ててください。

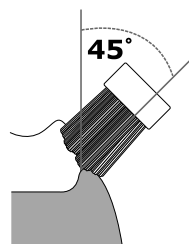

歯の裏側、凹凸の激しい部分は
歯の角度に合わせ、ブラシを
縦に当ててください。

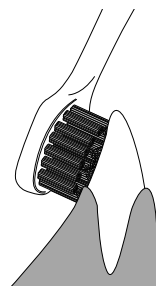

歯の平面部分はブラシを歯に対して
90°に当ててください。

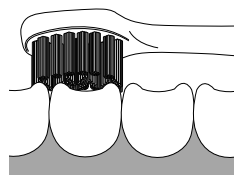


ご使用方法

▶歯茎のケア


歯ブラシの先端が歯茎に軽く触れる程度にあて、ゆっくりと動かしてください。

ブラシの毛先が歯に対して45°になるように当ててください。特に気になる部分は念入りに（1か所約10～20秒程度）あててください。歯磨き後に1日1回、約2分間の使用をおすすめします。

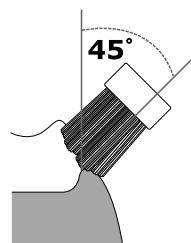

▶舌のケア

舌ブラシ（背面）で、触れる程度のやさしい力で舌の奥から手前へ動かしてください。

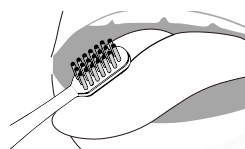

日常の点検・お手入れ


[目次へ↑](#)

お手入れの際は必ず電源をオフにした状態で行ってください。

▶ ブラシ

本体から外し、水またはぬるま湯でよくすすぎ洗いして乾かしてください。

※最適なブラッシング効果を得るため、ブラシは約1ヶ月ごとに交換することをお勧めします。（使用頻度により異なります）

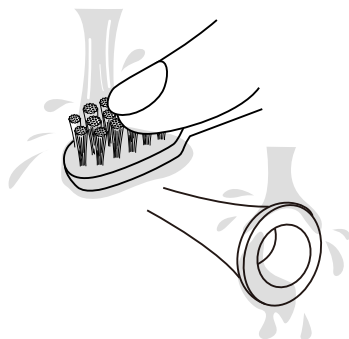


ブラシの内側や底面部の汚れを十分に洗い流してください。

▶ 本体

ブラシを外し、水またはぬるま湯でよくすすぎ洗いして乾かしてください。

※本製品は防水基準IPX7に対応していますので水洗いしても問題ありません。

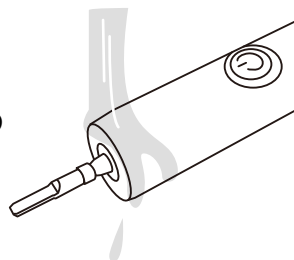

▶ 充電器

水で湿らせた後、固く絞った布で拭いてください。

※USBプラグ部分は絶対に濡らさないでください。故障の原因となります。

※充電台は水につけないでください。

掃除後はブラシ・本体についた水分をしっかりと拭き取り、濡れたまま充電しないでください。

保管のしかた

[目次へ↑](#)

- ・ 使用後は必ず本体とブラシを十分に乾燥させてから充電台に置き、風通しの良い場所で保管してください。
※充電台は防水仕様ではありませんので、本体が湿った状態で置くと故障の原因となります。
- ・ 長期間使用しないときは、本体のお手入れ及び充電をしてから保管してください。
- ・ 1ヶ月に1回は充電してください。
- ・ 使用しないときは本体の電源をオフにし、USBプラグをUSB接続式ACアダプター等から抜いて保管してください。
- ・ 火のそばや直射日光のあたるところ、浴室など高温多湿の場所に放置しないでください。
- ・ 子供の手の届かない場所に保管してください。



内蔵されているリチウムイオン電池は取り外し、充電式電池リサイクル協力店にご持参、または設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。

www.jbrc.com

▶取り外し方

手袋等を着用し、必ず放電した状態で行ってください。

- 1.本体底面のネジをドライバーを使い、反時計回りに回し取り外してください。
- 2.充電口に、分解用ネジを差し込み、時計回りに回し分解用ネジの半分程度入れてください。
- 3.分解用ネジを底面カバーごと引き抜き、本体内部から取り出した後、リチウムイオン電池を取り出してください。
- 4.取り外したリチウムイオン電池は、端子をセロハンテープ等で絶縁してください。

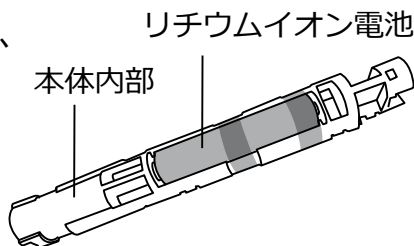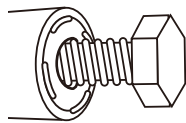

故障かな？


[目次へ↑](#)

動かない

原因	充電が切れている。
対処方法	充電してください。


充電できない

原因	充電器が正しくセットされていない。
対処方法	USB端子をしっかりとACアダプターに挿し込んでください。
原因	定格出力が5V1A未満のUSB接続式ACアダプターを使用していない。
対処方法	定格出力が5V1A以上のUSB接続式ACアダプターをご使用ください。

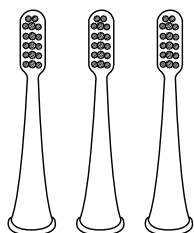


MTL-S004P1

替えブラシ スリムヘッド【コンパクト】
3本セット

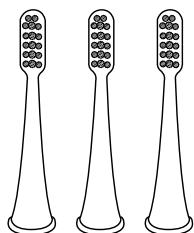


MTL-S004P2

替えブラシ スリムヘッド【コンパクト】
極細毛（やわらかめ）3本セット

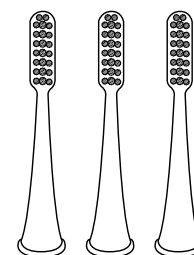

MTL-S004P3


替えブラシ スリムヘッド【スタンダード】
3本セット

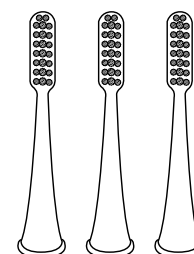

MTL-S004P4

替えブラシ スリムヘッド【スタンダード】
極細毛（やわらかめ）3本セット

アフター販売

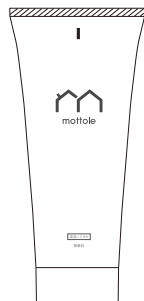

薬用 ホワイトニング 歯磨きジェル MTL-S007

弊社オフィシャルサイト（26ページ）にて本別売品、及び各製品の消耗品のご注文を承っております。

お電話でのご注文は代金引換のみの発送とさせていただきます。
北海道・沖縄及び離島の送料は弊社カスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本書の税額はすべて2020年12月時点の税率となります。

アフターサービス

[目次へ↑](#)

商品の品質には万全を期しておりますが、万一商品が破損・汚損していた場合は、在庫確認後に至急新しい商品とお取り替えさせていただきます。

補修用性能部品の生産終了後の保有期間は1年です。

その他ご不明点がございましたら下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。

アフターサービス

▶ 消耗品のご注文

オフィシャルサイトにて消耗品のご注文を承っております。

mottole.jp/c/0000000143



※オフィシャルサイトにてお取り扱いの無い消耗品及び
に関しましては、メールにてお問い合わせください。

▶ お問い合わせ

メールにてお問い合わせを24時間受け付けて
おります。16時以降のお問い合わせに関しましては、
翌営業日中に返答をさせていただきます。

下記のお問い合わせフォームよりお問い合わせ
をお願いいたします。

mottole.jp/f/contact



ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目を
ご確認のうえお問い合わせください。

- 品番 ■ 色 ■ お買い上げ日
- お買い上げ店名 ■ お問い合わせ内容

カスタマーサポートセンター

[目次へ↑](#)

ライフオンプロダクツ株式会社

<mottoleカスタマーサポートセンター>

〒550-0015

大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル8F

●個人情報のお取り扱いについて

ライフオンプロダクツ株式会社は、お客様の個人情報・ご相談内容を、ご相談への対応・修理、その確認などのために利用し、記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者には提供しません。

仕様

[目次へ↑](#)

品番	MTL-S004
電源	DC5V 0.45A
消費電力	2.3W
電源コード（約）	930mm
充電時間（約）	3時間
オートオフ（約）	2分
振動方式	音波式
振動数（約）	クリーンモード：20,000回/分、 ホワイトモード：40,000回/分
モード	2段階（クリーンモード、ホワイトモード）
防水性能	IPX7
本体寸法（約）	19×19×164mm
本体重量（約）	49g
セット内容	本体、替えブラシ スリムヘッド【コンパクト】、替えブラシ スリムヘッド【スタンダード】、充電スタンド、分解用ネジ、簡易説明書

※製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。